

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e materiais que são perigosos podendo causar danos. Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.

EPI's




PRECAUÇÕES

- Nunca ligar o banho sem antes encher a cuba, sob risco de danos irreversíveis ao equipamento;
- Não levantar o equipamento pelo painel de controle;
- Limpe a parte externa do banho uma vez por semana, com solução fraca de água morna e sabão neutro empregando esponja ou pano macio;
- Limpar o interior do banho com solução de uma colher de bicarbonato de sódio para cada litro d'água. Caso necessário utilizar antes, uma solução fraca de água e sabão neutro.

PAINEL DE CONTROLE

- A- Controlador de temperatura
B- Tecla Liga/Desliga

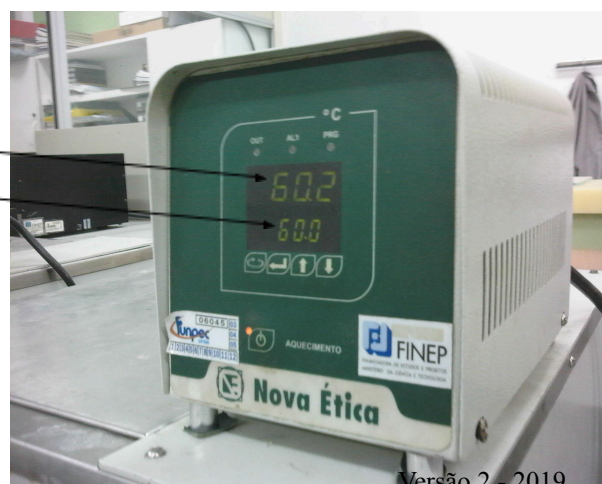

UTILIZANDO O EQUIPAMENTO

1. Coloque água no banho;
2. Ligue a chave geral que está localizada na parte traseira do equipamento;
3. Ligue o aquecimento;
4. Ajuste a temperatura desejada e espere sua estabilidade;
5. Coloque o material a ser testado de modo que a carga fique distribuída uniformemente. Utilize as luvas térmicas para alta temperatura ou os ganchos metálicos para auxiliar na colocação das amostras e/ou dos moldes na cuba;
6. Inicie o teste;
7. Ao concluir o teste, para retirada das amostras, utilize as luvas térmicas para alta temperatura ou os ganchos metálicos para auxiliar;
8. Limpe o equipamento e troque a água (se estiver turva e/ou com sedimentos).

Painel de Operação:



Sinalização:

OUT Acende ou pisca proporcionalmente à saída de controle;

AL1 Acende quando ocorrer um alarme. Pisca quando o alarme é temporizado;

PRG Pisca enquanto o controlador executa um programa de rampas e patamares. Acende quando o programa está parado (**Hold**);

SP Display inferior que apresenta o valor de set point.

Teclado:



Navegação entre blocos de parâmetros:

Pressionada 1 vez: Bloco de operação

Pressionada 2 s: Bloco de programas

Pressionada 4 s: Bloco de configuração

Pressionada 8 s: Bloco de calibração

Obs: Para retornar de qualquer parâmetro à tela principal, pressioná-la por 2 s.



Entra e sai no conteúdo dos parâmetros



Aumenta ou troca a variável apresentada. Nos blocos de parâmetros, sobe na coluna, parando no primeiro parâmetro.



Diminui ou troca a variável apresentada. Nos blocos de parâmetros, desce na coluna, parando no último parâmetro.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	Pequenas alterações de layout e no tópico “Utilizando o equipamento”	2	Bruno Costa	Julio Freitas